





安全のために必ず守ること






安全表示と記号

本文中に使われる“図記号”の意味は次の通りです。

●ご使用前に、「正しくご使用頂くために」「安全のために必ず守ることをよくお読みのうえ正しくお使いください。

●ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。表示と意味は次のようになっています。

 警告	誤った取り扱いをしたときに、死亡や重症等の重大な結果に結びつく可能性が大きいもの。
 注意	誤った取り扱いをしたときに、状況によっては重大な結果に結びつく可能性があるもの。

	一般的な注意を示しています。
	絶対に行わないでください。
	必ず指示に従い、行ってください。
	必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
	触れないでください。

★本書をお読みにになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。




⚠ 警告 けが・やけど・感電・火災の原因になります




●幼児、お年寄り、お体の不自由な方、ご自分で意思表示の出来ない方の治療には必ず付き添う。


●保護アミは、必ず閉めて固定ツマミでしっかり固定し、使用する。

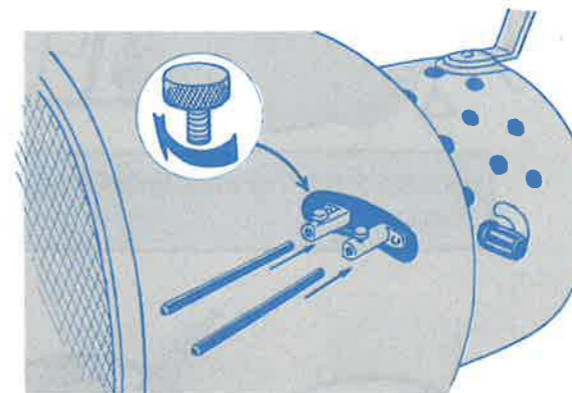

●カーボン電極は、カーボン固定ネジでしっかり取付ける。

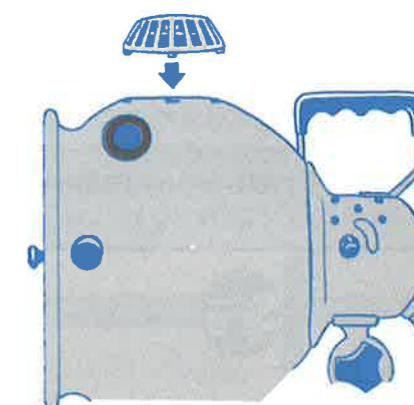

●照射器上部の排気口カバーは必ず取り付けて使用する。

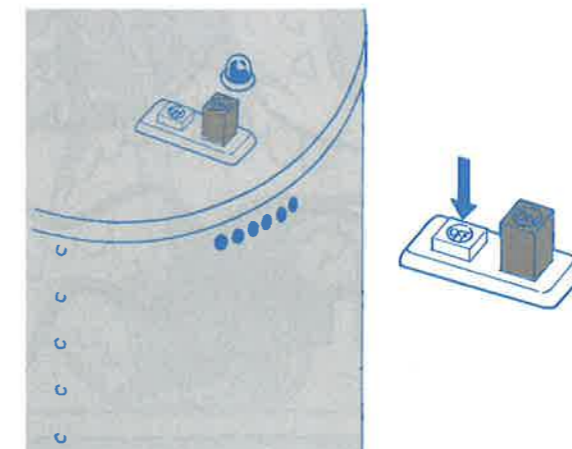


●カーボン電極の取り付けや交換、および治療終了後は必ず電源スイッチを「OFF」にする。

※次のページも必ずお読みください。



安全のために必ず守ること


⚠ 警告 けが・やけど・感電・火災の原因になります

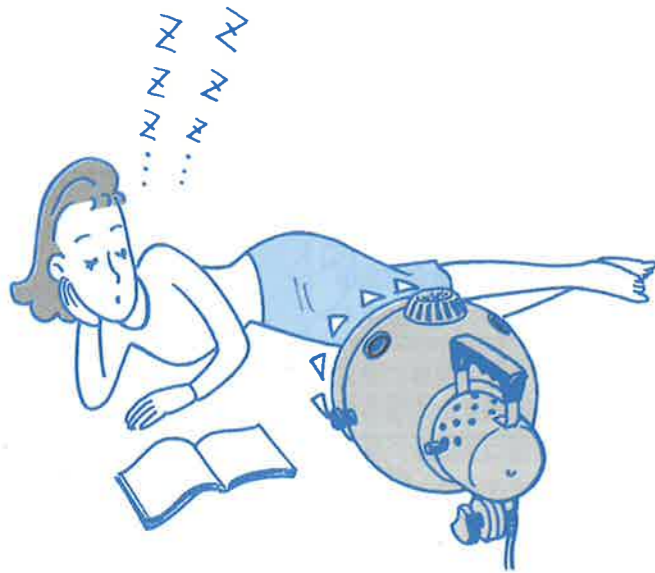


●発光させたまま就寝したり、治療器から離れない。




●治療中および治療後は照射器の上をもので覆わない。

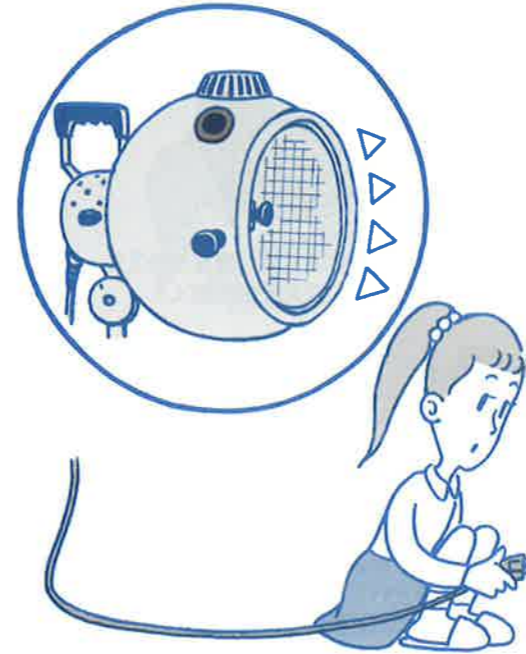


●発光中に電源差し込みプラグの抜き差しはしない。

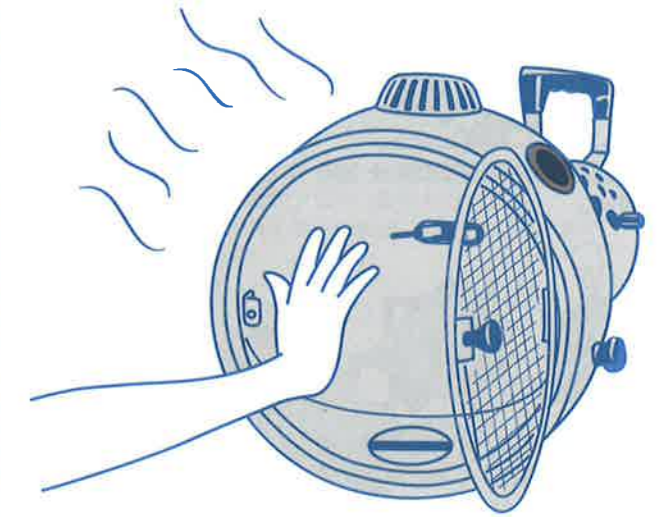


●保護アミ・照射器が冷えるまでは照射器の中に、手、紙、布等を入れない。

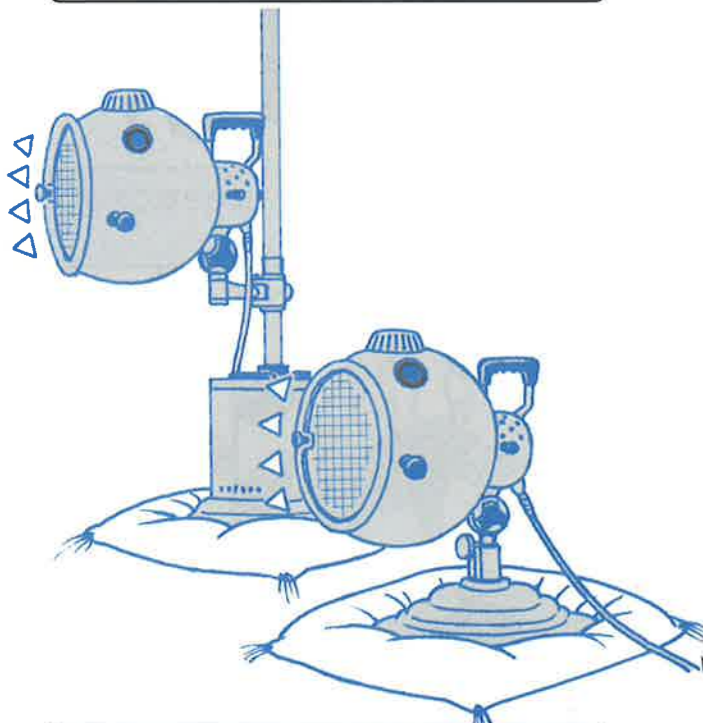


●燃えやすい物(座布団、敷布団、可燃性の物)の上に照射器を載せて発光させない。

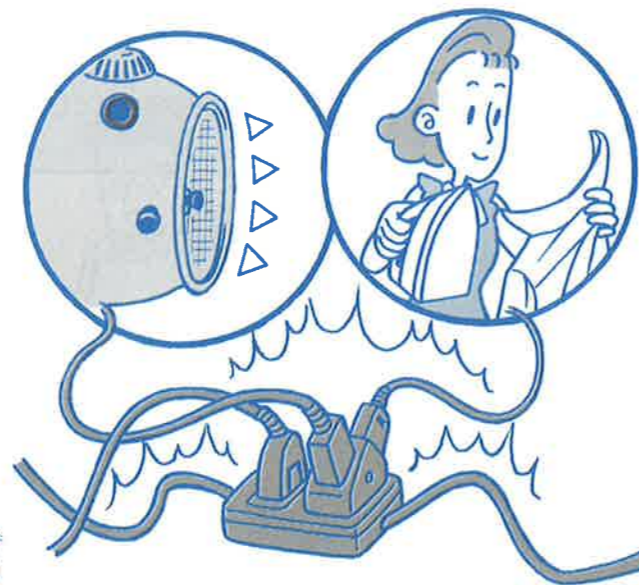

●電源コードの中間接続・延長コードの使用、タコ足配線はしない。

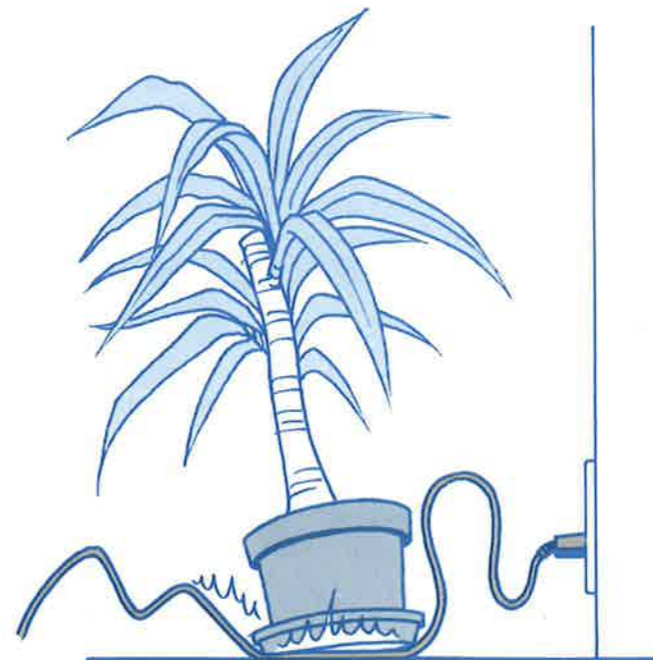

●コードは傷つけたり、重い物を載せたり、加工、加熱しない。

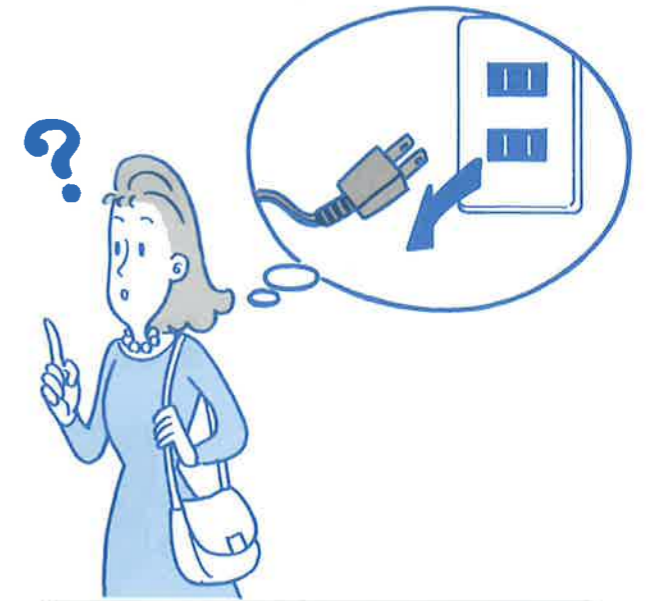


●使用しない時・外出の時は差し込みプラグを家庭用コンセントから抜く。




安全のために必ず守ること

⚠ 注意 けが・やけど・漏電・感電・火災の原因になることがあります

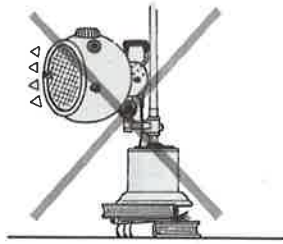


●転倒防止のため平らで安定した場所で使用する。

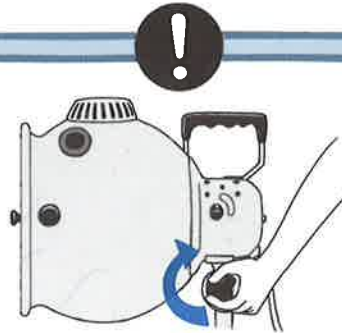


●照射器の角度調整ハンドルはしっかり締める。



●治療終了後はカーボン電極が冷えたら照射器内部に溜めず取り除く。

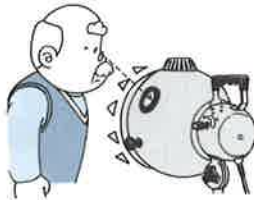

●発光状態の確認は、照射器の発光確認窓より行う。直視する場合はサングラス等を使用する。

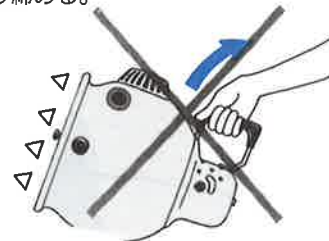

●照射中に照射器の移動、照射部位の変更をする場合は必ず発光を止める。



●コード等より異常な発熱や臭いが出た時、治療器の異常時には、直ちに使用を停止して電源プラグを抜く。修理についてはお問い合わせください。




●お客様自身で分解、修理、改造等をしない。●照射口保護ゴムは、はずさない。





●コードを引っぱらない。コードの取り扱いは必ずプラグ部分を持って行う。




●濡れた物の乾燥や用途外に使用しない。

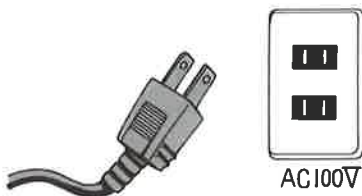


●家庭用電源（交流100V）以外で使用しない。

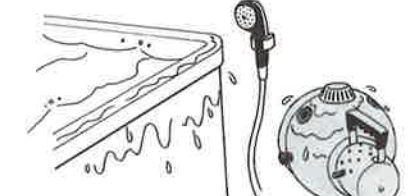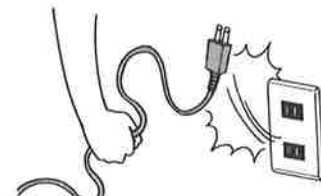


●浴室等水分や湿度の高い所、屋外では使用しない。

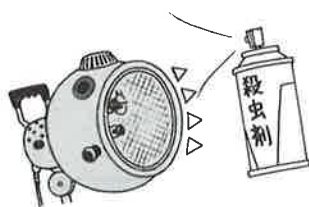

●ベンジン、殺虫剤、可燃性スプレー等揮発性の強い物を吹き付けない。

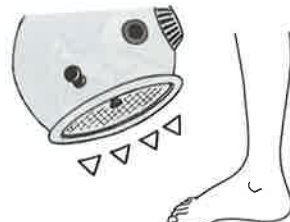

●照射器はなるべく水平にし、下向きで使用しない。

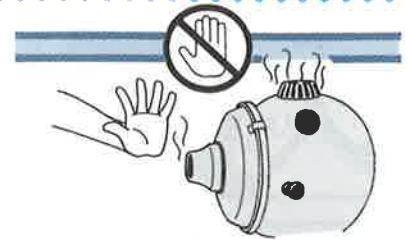

●治療中、治療後冷えるまではカーボン電極、保護アミ、集光器、照射器に手足等を触れない。